

La edad de las mascotas es distinta a la de los humanos

Edad canina	Edad humana	Edad felina	Edad humana
1 año de edad	18 años	1 año de edad	21 años
3 años de edad	28 años	3 años de edad	33 años
7 años de edad	44 años	7 años de edad	55 años

- La edad de las mascotas es fácil de ignorar.

- Conforme la edad de las mascotas avanza, el riesgo de contraer enfermedades avanza, especialmente daño en los riñones.

- Realizar exámenes de orina es esencial para mascotas de edad avanzada.

El significado de examen de orina


La orina es generada por el riñón, que contiene diferentes tipos de metabolitos. Algunas enfermedades pueden causar cambios en el nivel de los metabolitos, especialmente daño renal. La prueba de orina es para examinar los niveles de estos metabolitos para ayudar a los veterinarios a diagnosticar las enfermedades.

La forma más sencilla es observar los colores de la orina. El color normal es amarillo claro, el cambio de color debe llamar la atención de los dueños de mascotas, porque probablemente refleja síntomas de alguna enfermedad. La mejor opción es llevar a las mascotas a la clínica para recibir ayuda profesional.

Generalmente el veterinario le recomendará hacer un examen de orina para tener un mejor diagnóstico.



UA-60V Analizador de Orina Veterinario

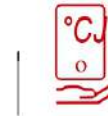

Diseño portátil y tamaño compacto



Más parámetros, dos tiras



Manejo fácil, flujo de trabajo eficiente

	Parámetros
Tiras-11 Tiras-15	LEU
	URO
	BIL
	GLU
	ASC
	SG
	KET
	NIT
	pH
	BLO
	PRO
	CRE
	MA
	CA
ACR	



Características Básicas

- Rendimiento: 120 p/h (modo rápido); 40 p/h (modo normal).
- Almacenamiento: 2.000 resultados.
- CV 1,0%

Especificaciones técnicas

- Principio: medición de reflectancia de fuente de luz fría.
- Longitud de onda: 525nm, 635nm

Parámetros

- LEU, URO, BIL, GLU, ASC, SG, KET, NIT, pH, BLO, PRO, CRE, MA, CA, ACR

Especies

- Perros y gatos

Impresora

- Impresora térmica

Ambiente de operación

- Temperatura: 15-30° C
- Humedad: 30%-85%

Peso y dimensiones

- Peso: 0.2kg
- Dimensiones: 120mm X 80mm X 29.5mm

Tiras

- Tipo: Tiras-11 y Tiras-15
- Volumen: 50 piezas por paquete
- Duración: 24 meses
- Estabilidad de botella abierta: 3 meses
- Condiciones de almacenamiento: almacene en un lugar seco a 0-30° C y evite la exposición directa al sol

UA-60V

Analizador de Orina Veterinario

Cuidado Renal al Alcance

